



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – HU
IN 26358 Kompressziós lábmasszírozó inSPORTline
Beinhowair II



TARTALOM

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK.....	3
TERMÉK LEÍRÁS.....	4
SPECIFIKÁCIÓK.....	5
HASZNÁLAT.....	5
BEKAPCSOLÁS	6
MÓD.....	6
VEZÉRLŐ	7
TISZTÍTÁS ÉS TÁROLÁS	8
HIBAELHÁRÍTÁS	8
KÖRNYEZETVÉDELEM	9

SevenSport s.r.o. fenntartja magának a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül bármilyen változtatást és fejlesztést hajtson végre termékén. Látogasson el weboldalunkra: www.insportline.eu, ahol megtalálja a kézikönyv legújabb verzióját.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

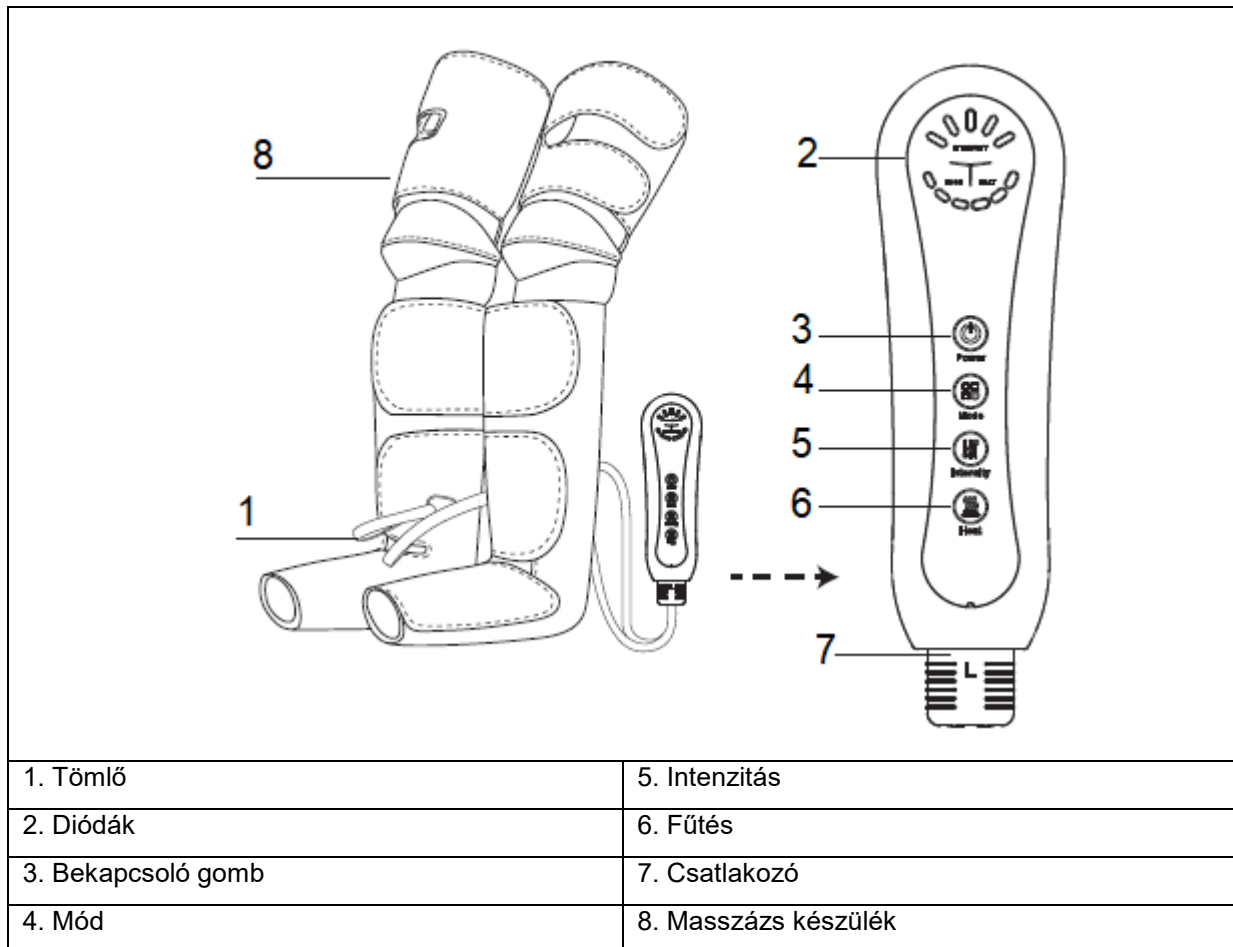
- Kérjük, használat előtt olvassa el a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi használatra.
- Ne javítsa vagy módosítsa saját maga a terméket. Ha a készülék megsérült, forduljon a szervizhez.
- Használat előtt fel kell tölteni a vezérlőt.
- Ne hagyja felügyelet nélkül gyermekek vagy csökkent szellemi képességű személyek közelében.
- A gondnokság alatt álló, illetve korlátozott mozgásképességű vagy szellemi képességű személyek csak felnőtt és felelős személy felügyelete mellett használhatják a terméket.
- Csak biztonságos környezetben használja.
- Ne tárolja gyermekek számára könnyen hozzáférhető helyen.
- Ne használja, ha gyulladásban szenved, megdagadt a lába vagy sérült a bőre (nyílt sebek, repedések, visszér stb.)
- Ne használja vízben (fürdőkád, zuhany, stb.)
- Tartsa távol víztől. Ne merítse vízbe vagy más folyadékba.
- Ne használjon rögzítéshez fémtárgyat.
- Tartsa szárazon a terméket.
- Ne használja nedves környezetben.
- Ne használja aeroszolos vagy magas oxigénkoncentrációjú helyiségekben.
- Az első használat során használjon alacsony intenzitást.
- Használat közben üljön vagy feküdjön le.
- Ne helyezzen idegen tárgyakat a tömlőkbe.
- Csak otthoni használatra alkalmas.
- Ne viseljen olyan ruhát, amely károsíthatja a terméket. (fémelemeket vagy éles széleket tartalmazó ruházat).
- Ha bármilyen mellékhatás jelentkezik (kipirosodott vagy irritált bőr, kiütés, viszketés stb.), azonnal hagyja abba a használatát és forduljon orvoshoz.
- Minden használat előtt ellenőrizze a termék állapotát és működképességét.
- A készülék nem helyettesíti az orvosi ellátást. Ha fájdalmat vagy hányingert érez, azonnal hagyja abba a készülék használatát, és forduljon orvoshoz. Ha nem biztos benne, a készülék használata előtt mindig konzultáljon orvosával.
- Ha valaha az alábbi betegségeket tapasztalta, forduljon orvoshoz: daganatok, szívbetegségek, rossz hőmérséklet-érzékelés, eszméletvesztés, nyílt seb az alkalmazás helyén, láz (gyulladás, vérnyomásváltozás stb.)

Ne használja:

- Terhesség alatt vagy szülés után.
- Olyan személyek, akik pacemakert vagy más orvosi implantátumot használnak.
- Szív- vagy érrendszeri betegségben szenvedők.
- Rendellenes vérnyomásban szenvedők.
- Csontritkulásban, gerinckárosodásban, izomkárosodásban vagy más akut betegségben szenvedők.
- Daganatos személyek.

- A műtét utáni személyek.
- Érzékeny bőrű vagy vérkeringési problémákkal küzdők.

TERMÉK LEÍRÁS




SPECIFIKÁCIÓK


Név	Kompressziós lábmasszírozó
A tápegység specifikációi	DC12V, 2A
Teljesítmény	30W
Hőmérséklet	40/45/50 °C (alacsony/közepes/nagy intenzitású)
Automatikus kikapcsolás	10/15/20/25/30 perc
Ajánlott használati idő	15 perc minden üzemmódhoz, 60 perc naponta
Masszázs intenzitása	Láb: gyenge: 30 kpa, közepes: 36 kpa, magas: 38 kpa
	Vádli, alsó rész: gyenge: 22 kpa, közepes: 24 kpa, magas: 30 kpa
	Vádli, Felső: Alacsony: 22 kpa, Közepes: 24 kpa, Magas: 30 kpa
Az állítható alkatrészek méretei	Lábhossz: 26-36 cm
	Vádli, alsó rész: 42 – 55 cm
	Vádli, felső rész: 53 - 75,5 cm
Tömeg	1.65 kg
Méret	71.5*25*18 cm

HASZNÁLAT

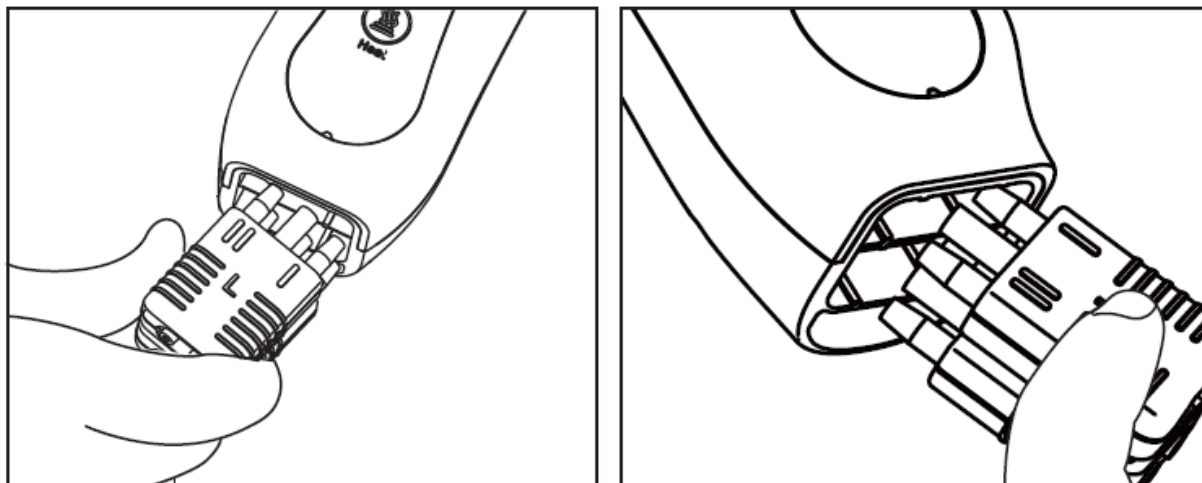Dugja be a csatlakozót a vezérlőbe. A csatlakozó meg van jelölve (L – bal, R – jobb). Csatlakoztassa a csatlakozót úgy, hogy L felfelé, R lefelé mutasson.




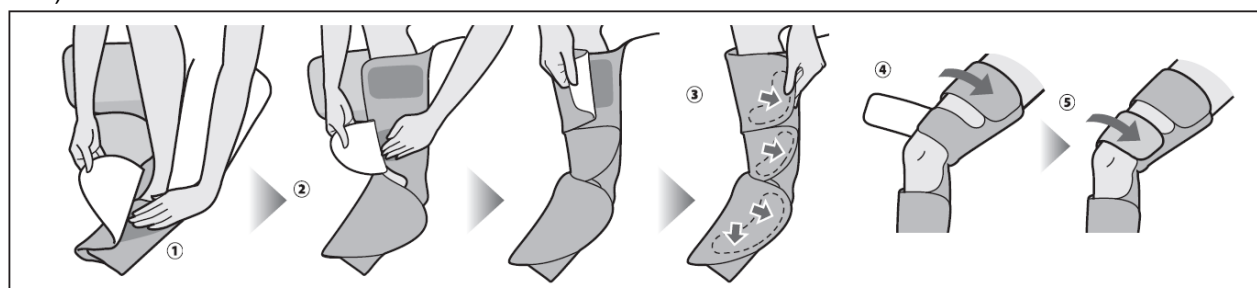Helyezze el a masszírozót a következő sorrendben: láb – vádli (alsó rész) – comb (felső rész)



BEKAPCSOLÁS

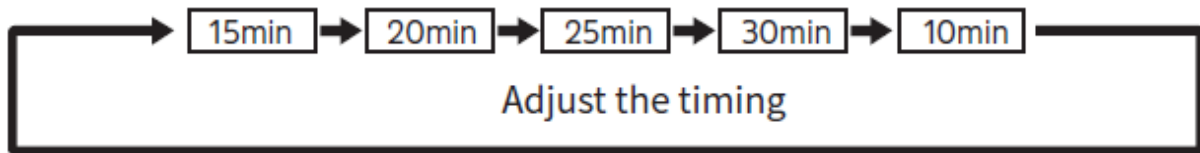Nyomja meg a bekapcsológombot a termék elindításához. A jelzőfény világít. Nyomja meg röviden a bekapcsológombot az időzítő módosításához. Minden alkalommal, amikor megnyomja a gombot, az időzítő 5 perccel növekszik, legfeljebb 30 percre.



Tartsa lenyomva a bekapcsológombot 3 másodpercig a masszírozó kikapcsolásához. A kijelzőn megjelenik



MÓD

Az üzemmód gomb megnyomásával módosíthatja a masszázs típusát.

Szekvenciális masszázs (alapértelmezett üzemmód indítás után)



Masszázs ciklus: a felső comb felfújódik és leereszt - a vádli alsó része és a lábfej felfújódik és leereszt - minden rész felfújódik és leereszt, majd rövid szünet következik, és a ciklus megismétlődik

Ciklikus masszázs



Masszázs ciklus: a comb felső része felfújódik és leereszti - a vádli alsó része és a lábfej felfújódik és leereszti - felfújja és leereszti, és a ciklus megismétlődik.

Kombinált masszázs



A masszázst egymás után végezzük: a combok felső részét felfújjuk és leeresztjük - a vádli és a lábfej alsó részét felfújjuk és leeresztjük - minden részt felfújunk és leeresztünk, az egyes ciklusok között késés van.

M1


Mode 1

M2

Mode 2


M3

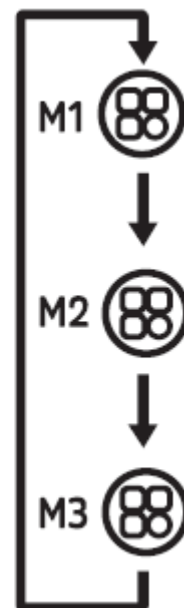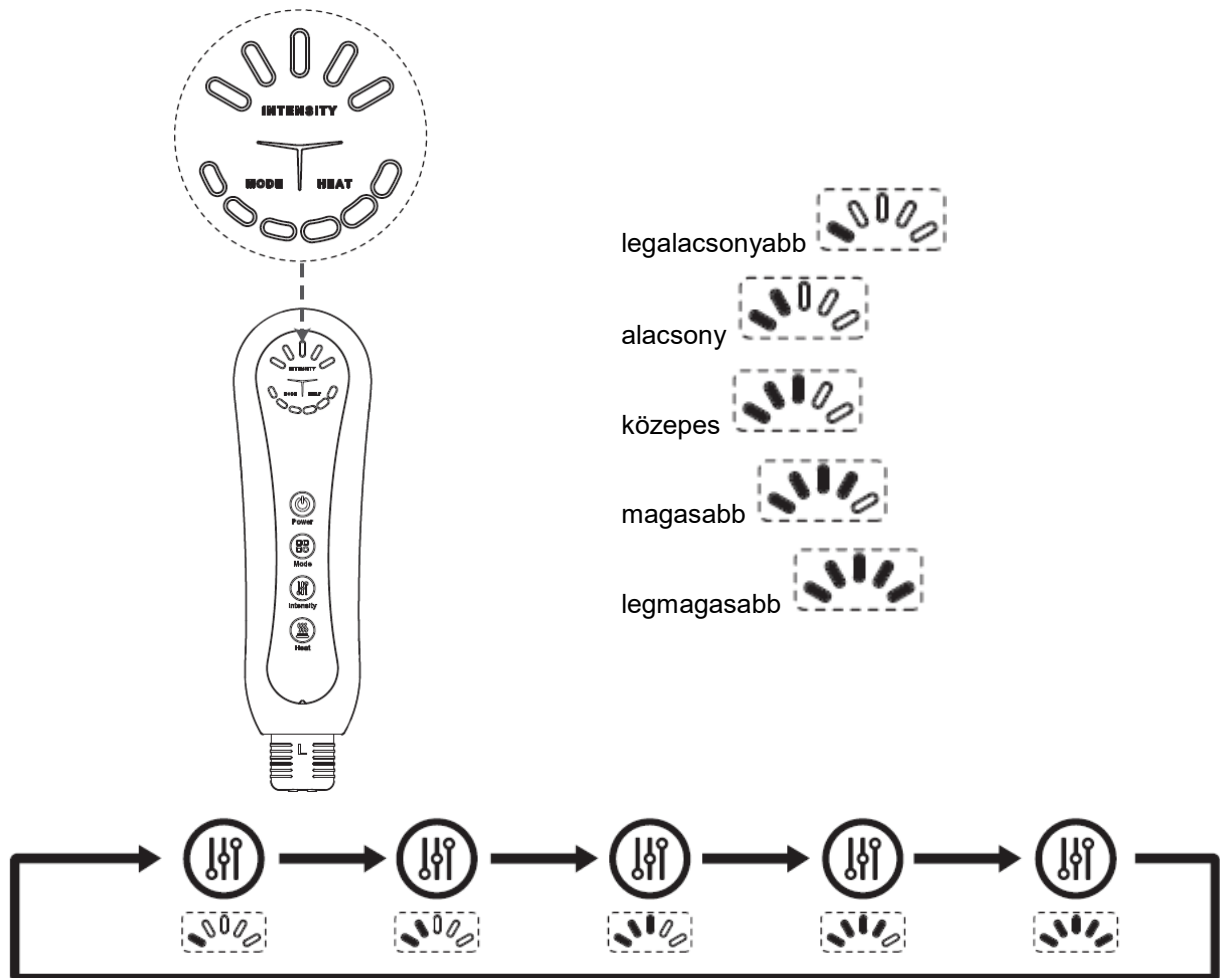Mode 3






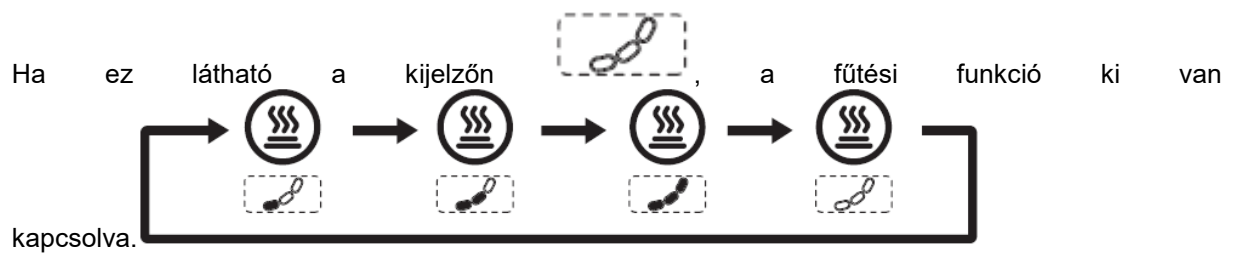
VEZÉRLŐ

Intenzitás



Fűtés

- alacsony 
alacsony hőmérséklet (40°C)
- Közepes 
Közepes hőmérséklet (45°C)
- Magas 
Magas hőmérséklet (50°C)



TISZTÍTÁS ÉS TÁROLÁS

Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket, és válassza le a tömlőket. Soha ne használjon benzol vagy alkohol alapú oldószereket és tisztítószereket.

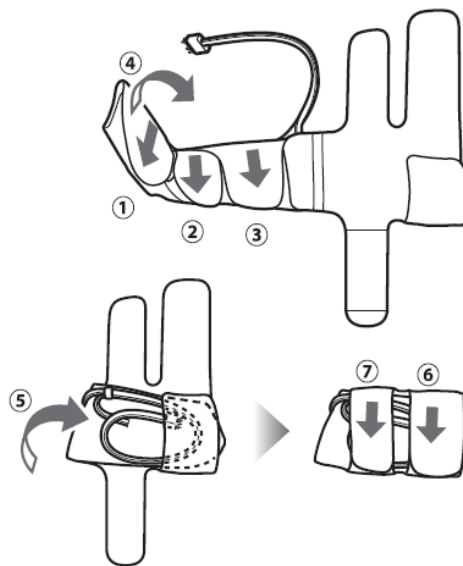
Tisztítsa meg a terméket langyos vízzel és enyhe tisztítószerrel (szappan stb.) átitatott nedves ruhával. Tisztítás után mindig szárítsa meg a terméket.

Soha ne helyezze a mosógépbe, és ne érje víz belülről.

Ne szárítsa szárítógépben.

Védje a tépőzárát a szennyeződésektől.

Tároláshoz állítsa össze a terméket a képeknek megfelelően és tárolja az eredeti csomagolásban.



HIBAELHÁRÍTÁS

Gyakori problémák és lehetséges megoldások

Hiba	Megoldás
Nem lehet elindítani	Power is not connected
A készülék működés közben leáll	1. Az áramellátás megszakad 2. Ellenőrizze, hogy a tömlő csatlakoztatva van-e 3. Ellenőrizze a tömlőt
A levegő nem áramlik	Sérült légtömlő
A fűtés nem működik megfelelően	1. A felmelegedés 5 percig tarthat. 2. Túl laza 3. Hibás termékkopás
Az intenzitás alacsony	1. Túl laza 2. Vastag ruhát hordasz
Az intenzitás magas	Lazítsa meg a tépőzárát
A levegőt nem lehet kifújni	Válassza le a vezérlőt és a tömlőket

KÖRNYEZETVÉDELEM

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen.

Ezáltal megóvja a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól, hogy elkerülje a törvényszegést vagy a szankciókat.

Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre.