



## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – HU

**IN 26386 Légkompressziós masszázrendszer inSPORTline  
Compisimo**



# TARTALOM

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK.....	3
TERMÉKLEÍRÁS.....	3
LED VEZÉRLŐPANEL.....	4
MASSZÁZS TÍPUS.....	4
HASZNÁLAT.....	5
HIBAELHÁRÍTÁS.....	6
KÖRNYEZETVÉDELEM.....	6

SevenSport s.r.o. fenntartja magának a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül bármilyen változtatást és fejlesztést hajtson végre termékén. Látogasson el weboldalunkra: [www.insportline.eu](http://www.insportline.eu), ahol megtalálja a kézikönyv legújabb verzióját.

## BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Kérjük, használat előtt olvassa el a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi használatra.
- Ne használja olyan helyiségben, ahol gyúlékony, éghető vagy robbanásveszélyes gázok vannak.
- Ne használja, ha a következőkben szenved: akut bőrgyulladás, szívritmuszavar, bőrpír, vénás trombózis, tüdőödéma, akut vénás trombózis, instabil magas vérnyomás, visszér esetén, illetve pacemakerrel rendelkezők, fém implantátummal vagy egyéb elektronikus eszközzel rendelkezők.
- Lehetséges mellékhatások: kellemetlen érzés, ha magas a nyomás, bőrpír, viszketés, fájdalom, ha a nyomás túl magas.
- Nem alkalmas korlátozott motoros vagy mentális képességekkel rendelkező személyek számára.
- Ne javítsa vagy módosítsa saját maga a készüléket.
- Ha kényelmetlenséget vagy fájdalmat érez, azonnal hagyja abba a termék használatát.
- Ne használja folyamatosan 20 percnél tovább. Használatával kapcsolatban forduljon orvosához.
- Gyermekektől és háziállatoktól elzárva tartandó.
- Tartsa távol víztől és nedvességtől.
- A tápkábelt könnyen elérhető aljzatba kell bedugni.
- Tápellátás 220-240V.
- Tartsa szárazon a kezét, amikor a tápkábelt kezeli.
- Óvja a tápkábelt a sérülésektől.
- Tartsa távol hőforrásoktól vagy más fémektől.
- A tisztításhoz ne használjon oldószert vagy más agresszív tisztítószeret.
- Soha ne használja a terméket csupasz bőrön.
- Ez nem gyógyászati segédeszköz.
- Használat előtt ki kell csavarni a biztonsági csavarokat, ami a biztonságos szállítást szolgálja.

## TERMÉKLEÍRÁS

	
Fő egység	Kompresszió a lábakhoz
	
Kompresszió a karokhoz	Derék kompresszió

## LED VEZÉRLŐPANEL



1. Időzítő 10, 20, 30 perc	5. A - F programtípus
2. Intenzitásjelző, 8 fokozat (0-250 Hgmm)	6. Masszázs pozíció
3. intenzitás növelése	7. intenzitás csökkentése
4. Tápellátás	8. Indítás / szünet

**Az időjelző a masszázsból hátralévő időt mutatja**

A gomb megnyomásával beállíthatja az edzési időt 10 és 60 perc között. Minden megnyomás 10 perccel módosítja az értéket.

**Indikátor és intenzitás beállítása**

A és gombokkal állítsa be az intenzitást 10 Hgmm-rel, az eredeti beállított érték 120 Hgmm.

**Masszázs pozíció**

Az alapértelmezett beállítás a masszázs mind a 4 kamrával. Nyomja meg a gombot az adott kamra indításához/leállításához.

**Főkapcsoló**

Nyomja meg a gombot a készenléti módba kapcsoláshoz, nyomja meg újra a kikapcsoláshoz.

**Indítás / szünet**

Készenléti üzemmódban a gomb zölden világít.

Ha a masszázs fut, a gomb kék színű.

Nyomja meg a gombot a masszázs szüneteltetéséhez vagy elindításához.

**Masszázs típusa**

Nyomja meg a gombot a masszázs típusának A-F kiválasztásához.

## MASSZÁZS TÍPUS

A típus: relaxáló masszázs.


B típus: segít enyhíteni a varikózus vénák fájdalmát.

C típus: mélymasszázs az izomregenerációért.

D típus: segít a fogyásban a felső és alsó végtagokban és a derékban.

E típus: segíti a vérkeringést.

F típus: A+C+D masszázstípusok kombinációja.

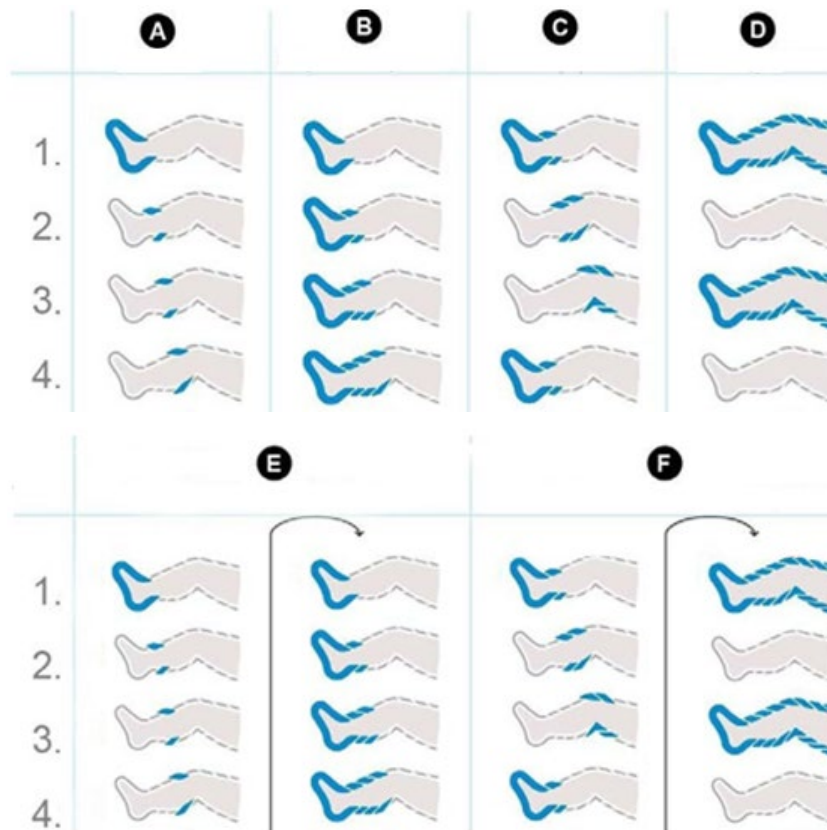

## HASZNÁLAT

A szállítási csavart használat előtt ki kell csavarni. Nyissa ki a fedelet és csavarja ki a csavart.



- Helyezze a készüléket sima és szilárd felületre.
- Csatlakoztassa a tápfeszültséget, és csatlakoztassa a csövet a készülékhez és a megadott kompressziós ujj.
- Kompresszió a lábaknak:
- A kellemetlen érzés elkerülése érdekében ellenőrizze, hogy a kompressziós ujj össze van-e hajtva.
- Viseljen vékony réteg ruhát.
- Húzza fel a teljes hosszúságú cipzárt. Csatlakoztassa a tömlőt az ujjhoz és a készülékhez. A készüléknek mindig a kijelző felé kell néznie.
- Kapcsolja be a készüléket, a masszázs időtartamát, intenzitását, a kamrák számát és a masszázs típusát. Nyomja meg a start gombot a masszázs elindításához. (készüléti üzemmód - zöld szín, működés közben - kék szín)

1. lépés	2. lépés
	Ellenőrizze a tömlőcsatlakozást, ha

Csatlakoztassa a 220-240 V-os tápegységhez.	csatlakoztatva van, hagyja ki a 3. lépést.
<b>3. lépés</b> Csatlakoztassa a tömlőt a kompressziós egységhez és a készülékhez.	<b>4. lépés</b> Győződjön meg arról, hogy az összes tömlő megfelelően van csatlakoztatva.
<b>5. lépés</b> Tegyen fel kompressziós ujjat. Figyelmeztetés: Ne tegye a tömlőt a nyakába.	<b>6. lépés</b> Nyomja meg a start gombot.
<b>7. lépés</b> Állítsa be az intenzitást a + és - gombokkal. Megjegyzés: Kezdetben alacsonyabb, 120-150 Hgmm nyomás használatát javasoljuk.	<b>8. lépés</b> Állítsa be az időzítőt. Megjegyzés: Tartomány 10 – 60 perc. Eredeti érték 10 perc. Ha az időzítő eléri a 0-t, a készülék kikapcsol.
<b>9. lépés</b> Válasszon módot.	<b>10. lépés</b> Válassza ki a kamrák számát. Megjegyzés: Válassza ki a masszázskamrák számát a gomb megnyomásával.
<b>11. lépés</b> Ha a gép működik, nyomja meg a start/stop gombot a masszázs leállításához. Megjegyzés: Ne távolítsa el a kompressziós hűvelyt, amíg az eszköz szünetel. Leszerelés előtt a készüléket ki kell kapcsolni.	<b>12. lépés</b> Ha végzett, válassza le a tömlőt.

## HIBAEELHÁRÍTÁS

A készülék nem indul el	Ellenőrizze a tápkábel csatlakozását. Ellenőrizze, hogy az eszköz fut-e. Ellenőrizze az aktuális feszültséget. Az időzítő kikapcsolása után a készülék automatikusan kikapcsolt
Természetellenes hangok (sziszegés stb.)	Ellenőrizze a tömlő csatlakozását és állapotát. Ellenőrizze a csatlakozók állapotát

## KÖRNYEZETVÉDELME

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen. Ezáltal megóvja a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi

hatóságoktól, hogy elkerülje a törvényszegést vagy a szankciókat.

Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre.