




HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ - HU

IN 27604 LED fényterápiás arcápoló gép inSPORTline
Coladome 300

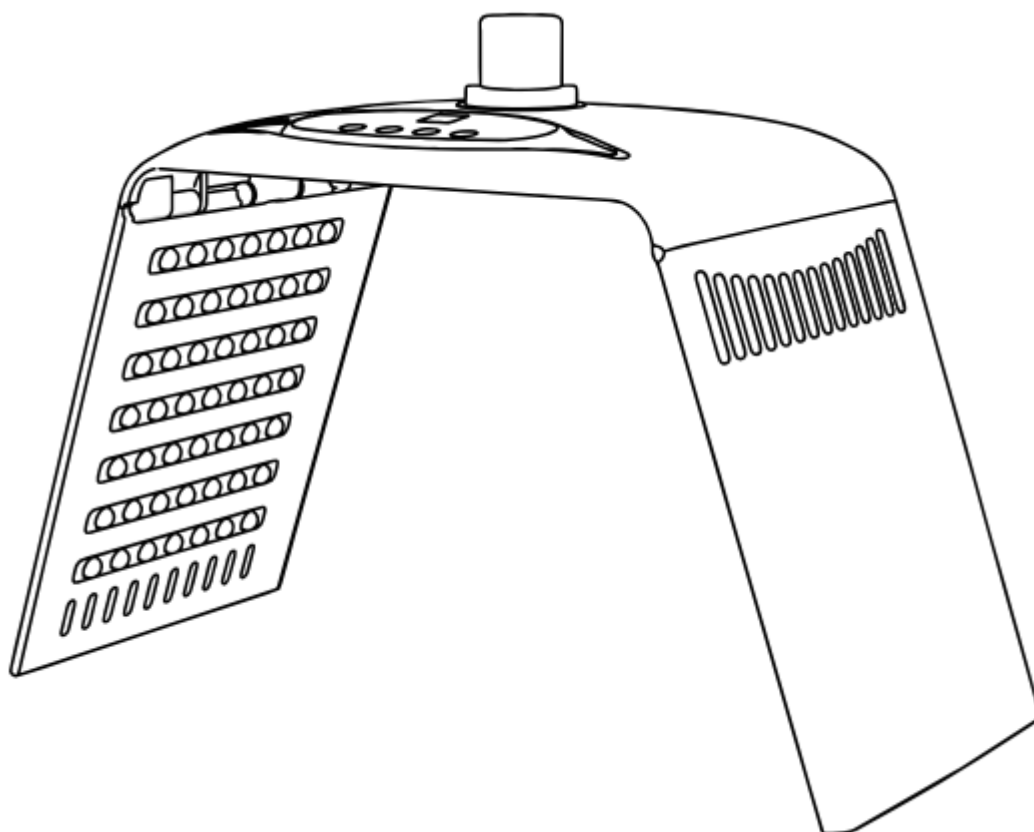

TARTALOM

| | |
|----------------------------|---|
| BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK..... | 3 |
| SZÉTNYITÁS..... | 4 |
| VEZÉRLŐPANEL | 5 |
| SPECIFIKÁCIÓ | 6 |
| KARBANTARTÁS..... | 6 |
| KÖRNYEZETVÉDELEM | 6 |

A SevenSport s.r.o. fenntartja magának a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül bármilyen változtatást és fejlesztést hajtson végre termékén. Látogasson el weboldalunkra: www.insportline.eu, ahol megtalálja a kézikönyv legújabb verzióját.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Használat előtt olvassa el a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi használatra.
- Őrizze meg a kézikönyvet más felhasználók számára.
- Tájékoztassa a többi felhasználót az alapvető biztonsági utasításokról és használatról.
- A készüléket csak tapasztalt és szükséges ismeretekkel rendelkező felnőtt személy használhatja.
- Használat előtt ellenőrizze, hogy a LED-lámpák és a készülék nem sérült-e.
- Ne használja és ne tárolja a készüléket magas páratartalmú helyen (fürdőszoba, szauna, úszómedence stb.).
- Csak jól szellőző helyiségben használja.
- A készüléket sima, szilárd és stabil felületre kell helyezni.
- Óvja a készüléket ütésektől és leesésektől.
- Használat közben ne használjon más hőszigetelő eszközöket.
- Tartsa távol a víztől.
- Ne dugja be sérült aljzatba.
- Ne használja, ha a kábel vagy a csatlakozó sérült.
- Használat után kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a konnektorból. Húzza ki a készüléket a karbantartáshoz és tisztításhoz.
- Ha víz kerül a készülékbe, azonnal húzza ki az áramforrásból.
- Ha a készülék szokatlan zajt vagy szagot bocsát ki, azonnal állítsa le a működést, és húzza ki a készüléket az áramforrásból.
- Ne módosítsa vagy javítsa saját maga a készüléket.
- A készüléket csak a kézikönyvben leírtak szerint használja. Bármilyen más felhasználás nem megengedett.
- Ne helyezze a készüléket hőforrás vagy nyílt tűz közelébe.
- Használat közben ne takarja le ruhával vagy más tárggyal.
- A készüléket csak száraz ruhával tisztítsa.
- Ne használja, ha bőrbetegségben, szívproblémában, magas vérnyomásban, irritációban vagy érzékeny bőr tüneteivel szenved.
- Mindig viseljen védőszemüveget!
- Javasolt üzemi hőmérséklet: 0 - 26 °C
- Javasolt tárolási hőmérséklet 0 - 35 °C
- Relatív páratartalom: <80%
- Használat gyakorisága: napi 25-30 percig használható egy hónapig, vagy bármilyen kozmetikai eljárás után. Akne kezelés részeként heti 3 alkalommal, 25 percig javasoljuk a használatát

TERMÉK LEÍRÁS



| | |
|----------------|-----------------|
| 1. Vezérlőpult | 5. LED-ek |
| 2. Víztartály | 6. Tápkábel |
| 3. Tápellátás | 7. Védőszemüveg |
| 4. Gőzkimenet | |

SZÉTNYITÁS


Kibontás előtt ki kell választani a megfelelő helyet hőforrásoktól és egyéb eszközöktől távol.

Napfénytől és magas páratartalomtól távol tartandó. Jól szellőző, stabil hőmérsékletű és páratartalmú helyiségben használja.



1. Hajtsa ki a gép mindkét oldalát, és helyezze sima és szilárd felületre.
2. Dugja be a tápkábelt a készülékbe.
3. Dugja be a tápkábelt az elektromos aljzatba.
4. Bekapcsolás után a kijelző világít.

VEZÉRLŐPANEL

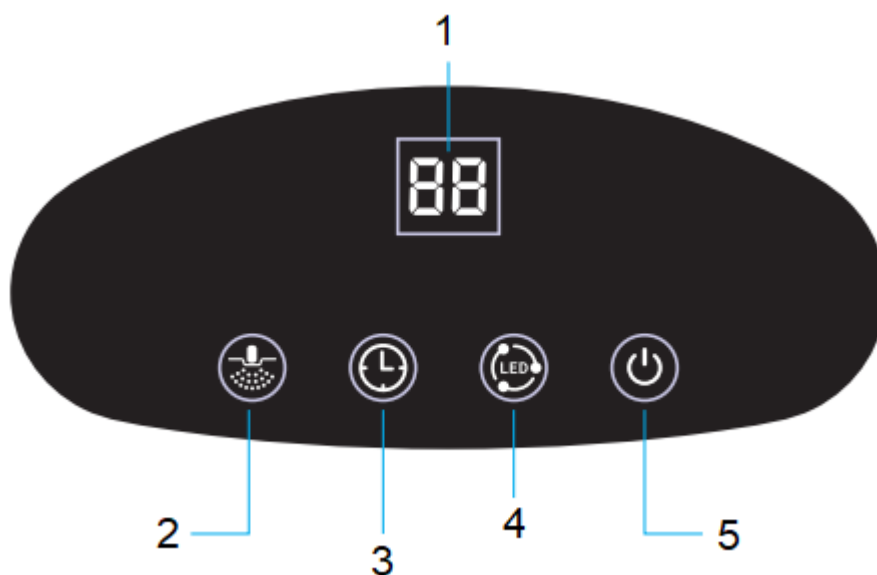

| | |
|-------------------|---------------|
| 1. Kijelző | 4. LED fények |
| 2. Gőzölő funkció | 5. Bekapcsoló |
| 3. Időzítő | |

BEKAPCSOLÁS

Az áramforráshoz való csatlakoztatás után a készülék készenléti üzemmódban van. A készüléket a főkapcsoló megnyomásával indíthatja el. A LED jelzőfény és a 30 perces időzítő világít.

A kikapcsoláshoz nyomja meg újra a bekapcsológombot

LED

A gomb megnyomásával a LED-lámpák beállításához 8 lehetőség közül választhat.

- 00 – készenléti üzemmód
- 01 – piros fény (hullámhossz 647 – 760 nm)
- 02 – kék fény (hullámhossz 430 – 455 nm)
- 03 – zöld fény (hullámhossz 492 – 550 nm)
- 04 – sárga fény (hullámhossz 550 – 580 nm)
- 05 – narancssárga fény (hullámhossz 588 – 647 nm)
- 06 – lila fény (hullámhossz 360 – 430 nm)
- 07 – kékeszöld fény (hullámhossz 480 – 490 nm)
- 08 – kerékpáros lámpa

IDŐZÍTŐ

Az időzítő kezdeti értéke 30 perc. A gomb megnyomásával az értéket 5 perccel, maximum 60 perc értékig módosíthatja.

Időbeállítási tartomány 0 – 60 perc.

Ha az értéket 3 másodpercig nem állítja be, a készülék az aktuálisan beállított értékkel kezd el dolgozni.



GŐZÖLŐ FUNKCIÓ

Bekapcsolás után a gőz funkció kikapcsol. Nyomja meg a gombot az intenzitás közötti váltáshoz (01 legalacsonyabb, 03 legmagasabb).

Ne öntsön illóolajat vagy más kozmetikai terméket a tartályba. Javasoljuk, hogy tiszta vizet használjon.

SPECIFIKÁCIÓ

| | |
|--------------|---------------------|
| Tápegység | DC12V, 3A, 50/60 Hz |
| Teljesítmény | Ca. 36W |
| Méret | 470x220x345 mm |
| Súly | 1,3 ±10% |

KARBANTARTÁS

- Puha ronggyal törölje le a készülék testét.
- Tárolja száraz és árnyékos helyen.
- Tárolja össze a készüléket.
- Minden kezelés vagy tárolás előtt a készüléket le kell választani az elektromos hálózatról.

KÖRNYEZETVÉDELEM

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen.

Ezáltal megóvja a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól, hogy elkerülje a törvényszegést vagy a szankciókat.

Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre.